

# ø 1.5 Sophia Locking System Line Up

## ø1.5 Sophia Locking Plate

材質：JIS2 種 純チタン

### ø1.5 ソフィア ロッキング プレート

#### ø1.5 Sophia Locking Plate Straight Type



#### ø1.5 Sophia Locking Plate H Type



#### ø1.5 Sophia Locking Plate TH Type



#### ø1.5 Sophia Locking Plate TO Type



商品コード	商品名	穴数	全長	幅	厚み	穴径
LS15-20T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート ストレート型	20	100			
LH15-24T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート H 型	24	118	4.5	1.7	2.0
LT15-26T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート TH型	26				
LO15-26T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート TO型	26	121			

\* 補助プレートとして穴ピッチが等しいカントゥアーリングサポートプレートが使用できます。\* 原寸大 ø1.5 ソフィアロッキングシステム 医療機器製造販売承認番号：30 動案第 3603 号  
\* 0.9mm 穴はガイドホールとして使用可能です。

## Locking Screw & Cortex Screw

材質：チタン合金

### ロッキングスクリュー & コーテックススクリュー

ø1.5 Sophia Locking Screw				Cortex Screw ø1.5	
ST型		SO型			
商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長
ST15-06T	6	SO15-06T	6	CR15-06T	6
ST15-07T	7	SO15-07T	7	CR15-07T	7
ST15-08T	8	SO15-08T	8	CR15-08T	8
ST15-09T	9	SO15-09T	9	CR15-09T	9
ST15-10T	10	SO15-10T	10	CR15-10T	10
ST15-12T	12	SO15-12T	12	CR15-12T	12
ST15-14T	14	SO15-14T	14	CR15-14T	14

ø3.0	ø3.0	ø3.0
六角サイズ 1.5	六角サイズ 1.5	六角サイズ 1.5
2.0	1.8	1.6
		全長

ST 動物用チタンスクリュー 医療機器製造販売承認番号：27 動案第 2965 号 (mm)

## ø1.5 Sophia Locking System Starter Set Line UP

### ø1.5 焼付修復スター セットラインナップ



ø1.5 ソフィアロッキングパレット (SL15-023)

商品コード	商品名	数量
LS15-20T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート ストレート型	1
LH15-24T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート H 型	1
LT15-26T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート TH型	1
LO15-26T	ø1.5 ソフィアロッキングプレート TO型	1
ST15-06T~14T	ø1.5 ソフィアロッキングスクリュー ST型 L6~L14mm	各3
SO15-06T~14T	ø1.5 ソフィアロッキングスクリュー SO型 L6~L14mm	各2
CR15-06T~14T	コーテックススクリュー ø1.5 L6~L14mm	各2
SL15-023	ソフィアロッキングパレット	1


\* 単体での販売可

## Drill CA-Vet

材質：ステンレス

### ドリルCA-Vet

コントラアングルハンドピース専用

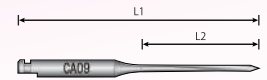


商品コード	サイズ	全長 L1	ドリル先 L2
30500000	ø 0.9	33.5	16
30500010	ø 1.1		
30500020	ø 1.5	43.5	25
30500030	ø 1.7		

\* 5 本入 / 1 Size  
販売元：デンテック 動物用一般医療機器

## ø1.5 Sophia Locking System Tool

### ø1.5 ソフィア ロッキング システム ツール

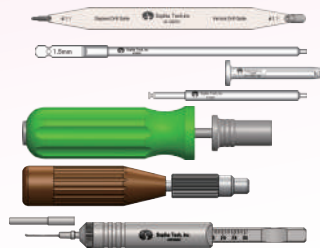

商品コード	商品名
TLDG-L15	ø1.5 ロッキング用ドリルガイド
TLSD-02S	スクリュードライバー 1.5
TLSD-03S	スクリュードライバー 1.5 用スリーブ
TLSD-04S	スクリュードライバー 1.5 (ミニクイック)
TLTQ-04N	0.4N・m トルクドライバー
TLHQ-001	ハンドトルククイック型
TLDP-01S	デブスゲージS ø1.5~2.4

\* 単体での販売可

#### 使用上の注意

- 本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しない。本製品は専用のスクリューを使用する。
- 応力集中が想定される箇所には、SO 型スクリューの使用を推奨。
- プレートと専用スクリューのロッキングには、0.4N・m のトルク値が推奨される。
- 異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しない。
- 肥満体の患者には慎重に使用する。(患者の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある)
- スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用する。
- 術後、完治するまでは外固定を併用する。
- 本製品を使用した患者には、注意深く術後管理を行なうこと。



#### 販売元

<http://www.sophiatech.co.jp>  
SophiaTech  
ソフィアテック事業部  
株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00~17:00迄  
TEL:042-736-3903  
FAX:042-735-2426  
E-mail: info@sophiatech.co.jp

#### 代理店